

Merkblatt zur Freischaltung von PIN und PUK des elektronischen Arztausweis-light (eA-light)



Anforderungen

Um die elektronischen Funktionen des eA-light zu nutzen, benötigen Sie immer einen an einen Rechner angeschlossenen geeigneten Smartkartenleser*. Zur eigentlichen Freischaltung ist eine Internetverbindung nur dann erforderlich, wenn Sie das Tool online benutzen wollen.

Wenn Sie den eA-light in der Kammer ausgehändigt bekommen haben, hat man Ihnen die Freischaltung i.d.R. schon abgenommen, d.h. Sie haben Ihre persönliche PIN und PUK bereits vergeben und benötigen die genannten Tools nur um ihre PINs zu ändern oder wiederherzustellen.

Alle PINs und PUKs dürfen ausschließlich aus Ziffernfolgen bestehen, wie sie auch auf der numerischen Tastatur eines sicheren Kartenlesers eingegeben werden können.

Die PIN benötigen Sie bei allen Aktionen mit der Karte bei der sicher sein soll, dass Sie die Karte selbst nutzen. Ihre PIN müssen Sie sich daher merken können. Die PUK benötigen Sie nur dann, wenn Sie die PIN versehentlich 3 x falsch eingegeben haben. Ihre PUK müssen Sie ggf. nachschlagen können.

* Welche Lesegeräte für Ihren eA-light geeignet sind, können Sie aus unserem Merkblatt über geeignete Lesegeräte in unserem Portal www.meineaekno.de oder auf www.aekno.de nachlesen.

Kartenadministrationstool

Voraussetzungen für die Freischaltung mit SecCardAdmin

Der Dienstleister SecCommerce Informationssysteme GmbH (www.seccommerce.de) unterstützt die Ärztekammer Nordrhein bei Lösungen für signaturbasierte Authentifizierungen.

Für die Nutzung des SecCardAdmin benötigen Sie auf dem Rechner (Windows, Linux, MAC OS X) neben dem korrekt angeschlossenen Kartenleser immer die installierte Software JAVA (Version 1.4.2 oder grösser) und einen Browser (Firefox, Internetexplorer oder Chrome). Beides ist auf den aktuellen Rechnern i.d.R. bereits vorhanden.

1. Sie können das Tool online unter diesem Link starten:  <https://www.seccommerce.de/de/products/seccardadmin/seccardadmin-online.html>
Klicken Sie auf dieser Webseite unten auf .
2. SecCardAdmin: www.seccommerce.de/cust/SecCardAdmin.zip
Entpacken Sie die Zip-Datei in einen gleichnamigen Ordner. Mit Doppelklick auf die Datei index.html in diesem Ordner startet der Browser und JAVA.

Freischaltung mit SecCardAdmin

Das Tool SecCardAdmin lässt sich für folgende Funktionen nutzen:

- Freischaltung Ihres eA-light
- Änderung Ihrer PIN
- Einsehen der Funktionalität Ihres Ausweises



1. Bitte stecken Sie Ihren elektronischen Arztausweis-light (eA-light) in ein geeignetes Kartenlesegerät*.
2. Starten Sie das Tool SecCardAdmin indem doppelt auf *index.html* in dem Ordner klicken in dem Sie die Datei SecCardAdmin.zip zuvor entpackt hatten oder online indem Sie einmal auf die Schaltfläche  SecCardAdmin Online starten klicken .
3. Wählen Sie die „Automatische Suche“ Funktion aus.

* Welche Lesegeräte für Ihren eA-light geeignet sind, können Sie aus unserem Merkblatt über geeignete Lesegeräte in unserem Portal www.meineaeckno.de oder auf www.aekno.de nachlesen.


Freischaltung mit SecCardAdmin

Es öffnen sich nur kurz Protokollfenster, dann der Dialog Kartenverwaltung.

4. Klicken Sie auf „Informationen zur Signaturkarte“.



5. Prüfen Sie ob die ICCSN mit der aufgedruckten Ausweisnummer übereinstimmt. Hinter Fehlbedienungszähler der PIN und der PUK sollte der Eintrag „noch nicht vergeben“ stehen, sonst wurde die Karte bereits genutzt. Klicken Sie auf „<< zurück“.

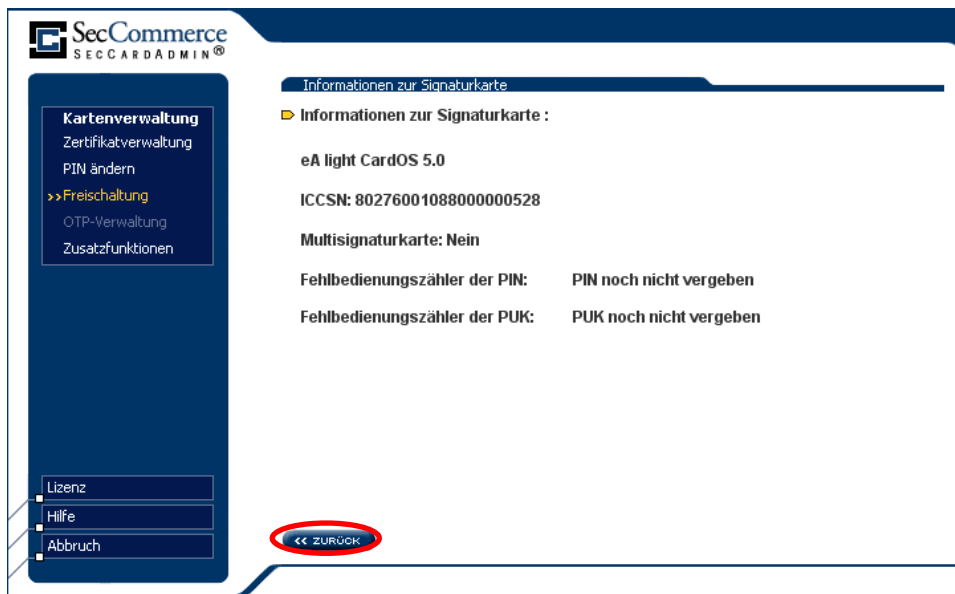


Freischaltung mit SecCardAdmin

Sie befinden sich jetzt wieder im Dialog *Kartenverwaltung*.

6. Klicken Sie auf „Freischaltung“.




7. Klicken Sie auf „PIN ändern“.

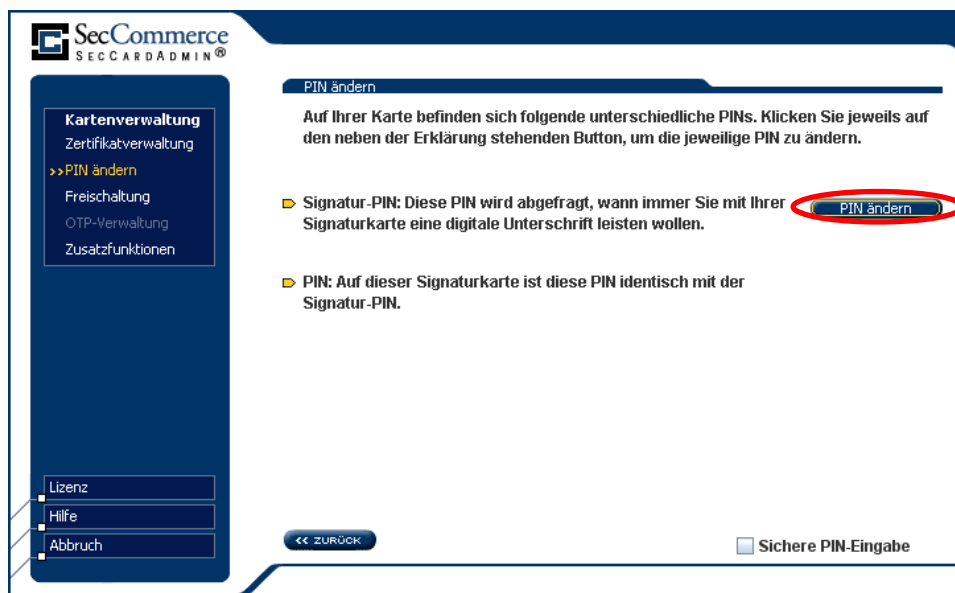


Freischaltung mit SecCardAdmin

Sie kommen jetzt zum Setzen von PIN und PUK. Nehmen Sie Ihr PIN und PUK Merkblatt zur Hand, indem Sie sich zuvor die ausgedachte PIN und PUK notiert haben und indem die Kammer die Transport-PIN für Ihren eA-light vermerkt hat. Damit Sie sich nicht ausversehen bei der Eingabe Ihrer Wunsch-PIN und -PUK vertippen, müssen Sie PIN und PUK jeweils zweimal eingeben.

8. Bestätigen Sie den Hinweis des Herstellers zur PIN mit OK.

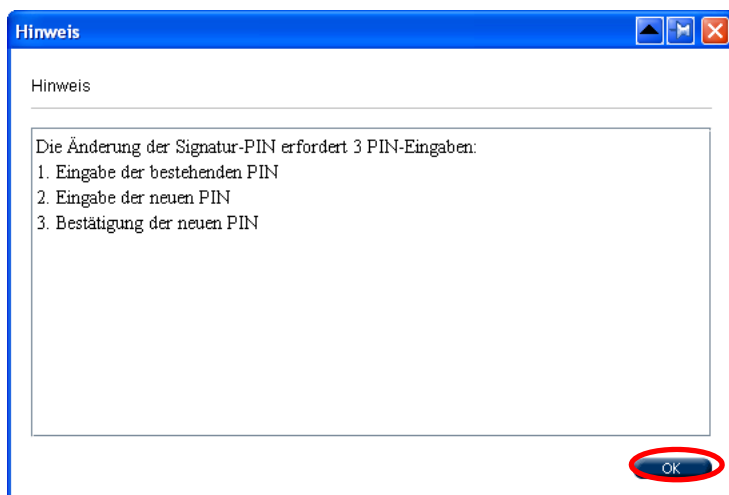

Damit kommen Sie in den eigentlichen Freischaltungsdialog.

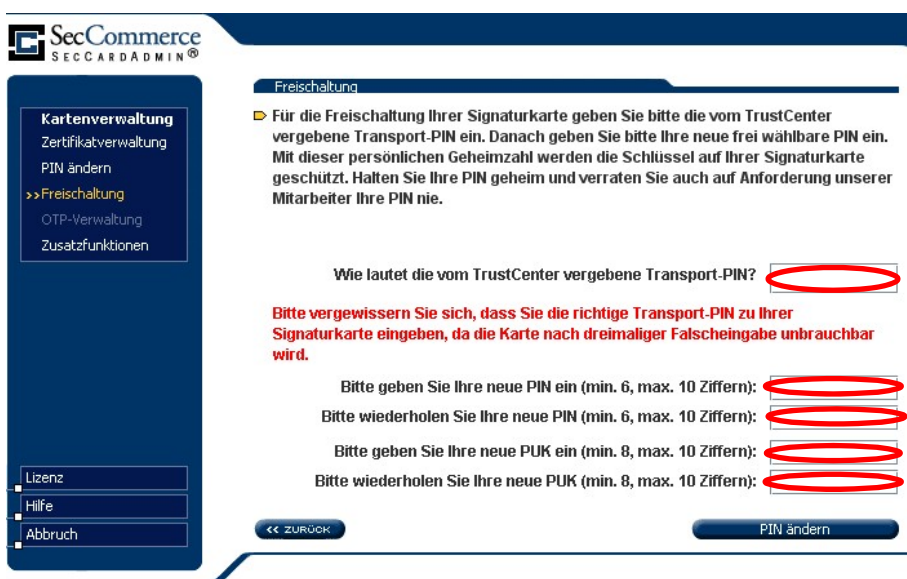

9. Geben sie hier:

- die Transport-PIN und
 - zweimal Ihre neue PIN und
 - zweimal Ihre neue PUK
- in die entsprechenden Felder ein.

Freischaltung mit SecCardAdmin

10. Prüfen Sie die Eingabe der Transport-PIN sorgfältig und geben Sie nur vorher notierte PINs und PUKs ein. Klicken Sie zum Abschluss auf „PIN ändern“.

SecCommerce
SECCARDADMIN®

Kartenverwaltung
Zertifikatverwaltung
PIN ändern
>>Freischaltung
OTP-Verwaltung
Zusatzfunktionen

Freischaltung

■ Für die Freischaltung Ihrer Signaturkarte geben Sie bitte die vom TrustCenter vergebene Transport-PIN ein. Danach geben Sie bitte Ihre neue frei wählbare PIN ein. Mit dieser persönlichen Geheimzahl werden die Schlüssel auf Ihrer Signaturkarte geschützt. Halten Sie Ihre PIN geheim und verraten Sie auch auf Anforderung unserer Mitarbeiter Ihre PIN nie.

Wie lautet die vom TrustCenter vergebene Transport-PIN?

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Transport-PIN zu Ihrer Signaturkarte eingeben, da die Karte nach dreimaliger Falscheingabe unbrauchbar wird.

Bitte geben Sie Ihre neue PIN ein (min. 6, max. 10 Ziffern):

Bitte wiederholen Sie Ihre neue PIN (min. 6, max. 10 Ziffern):

Bitte geben Sie Ihre neue PUK ein (min. 8, max. 10 Ziffern):

Bitte wiederholen Sie Ihre neue PUK (min. 8, max. 10 Ziffern):

<< ZURÜCK **PIN ändern**

Lizenz
Hilfe
Abbruch

11. Die Karte ist freigeschaltet, PIN- und PUK können jetzt genutzt werden. Um die Rückmeldung zu schließen, klicken Sie auf OK.

Hinweis

Hinweis

Die Signatur-PIN wurde erfolgreich geändert.

OK

Freischaltung mit SecCardAdmin

Unter *Informationen zur Signaturkarte* können Sie jetzt den aktuellen Stand der Fehlbedienungsähler sehen:



The screenshot shows the SecCommerce SECCARDADMIN web interface. On the left is a dark blue sidebar with a menu under 'Kartenverwaltung' (Card Management) containing 'Zertifikatverwaltung', 'PIN ändern', '>> Freischaltung' (highlighted in yellow), 'OTP-Verwaltung', and 'Zusatzfunktionen'. Below this are buttons for 'Lizenz', 'Hilfe', and 'Abbruch'. The main content area has a title 'Informationen zur Signaturkarte' and a sub-header 'Informationen zur Signaturkarte :'. It displays the following details:

- eA light CardOS 5.0
- ICCSN: 80276001088000000528
- Multisignaturkarte: Nein
- Fehlbedienungsähler der PIN: 3 von 3 möglichen Fehlversuchen
- Fehlbedienungsähler der PUK: 10 von 10 möglichen Fehlversuchen

At the bottom of the main area is a button labeled '<< ZURÜCK'.

Ansprechpartner

elektronischer Heilberufsausweis (eHBA)

elektronische Gesundheitskarte (eGK)



Projektbüro Arztausweis

Ärztekammer Nordrhein
Tersteegenstr. 9
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 4302 2560
E-Mail: arztausweis@aeckno.de

Telematik / Arztausweise

Herr Krön
Telefon: 0211 4302 2208
E-Mail: kroen@aeckno.de

Beantragung von Arztausweisen

Herr Christopoulos
Telefon: 0211 4302 2211
E-Mail: christopoulos@aeckno.de